

取扱説明書

Instruction Manual

トレーボックス

navis

8-2314-21~24
8-1607-11~15



80H-3P/B, 120H-2P/B
No.1~5

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

特 長

- ・スムーズな開閉と優れたデザインのトレーボックスです。
- ・B4サイズの書類が入るワイドな設計で、小物や器具機材類も収納することができます。
また、別売で全ての引出しに共通な仕切板セット(5種類)により、各引出しをフレキシブルに区切ってお使い頂けます。
- ・引出しは抜け落ち防止のためのストッパーが付いており、不意の落下を防ぎます。
- ・鍵は一つの鍵で全段一度にロックできる、トータルロックタイプです。

外観図

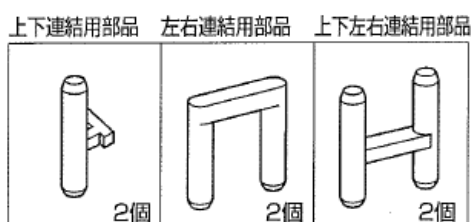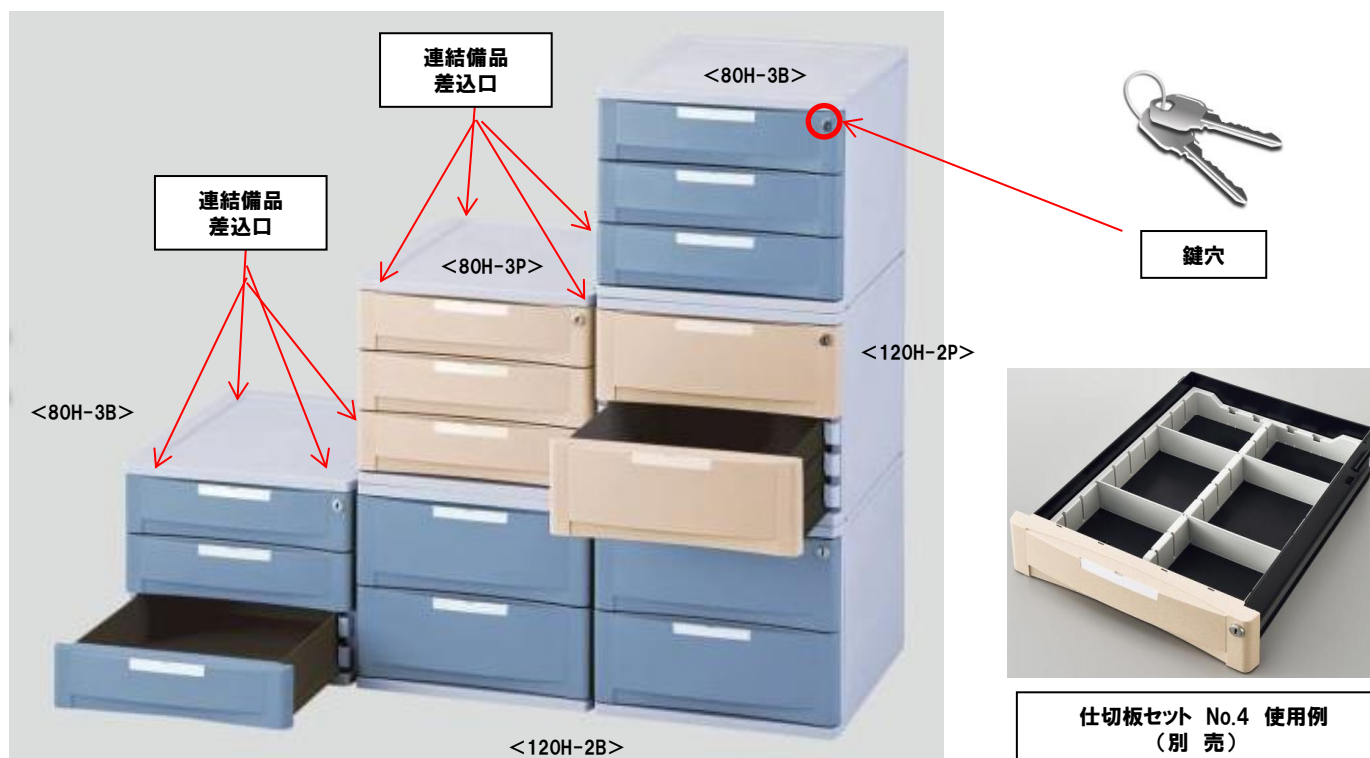

連 結 方 法

- ・ 本体上部の連結備品差込口(前後2箇所)に付属の連結用部品を差込んで下さい。
- ・ 連結位置により、付属の連結用部品からお選びいただきご使用下さい。

ご使用上の注意



- ・ 平坦で安定した位置で使用して下さい。
- ・ 引出しをロックしている時以外は、鍵が抜けない設計になっています。
- ・ **ロックしている時以外、鍵を抜かないで下さい。**
(引出しを開いた状態<オープン状態>で鍵を抜くと、引出しがスムーズに動きません。破損の原因になります。)
- ・ 本体・引出しなどに薬品や化学品が付着したら、すぐに拭き取って下さい。
長時間放置すると変色することがあります。
- ・ 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ・ 異常があった場合には使用を中止してください。本体が壊れる危険があります。
- ・ 重量物を載せたり、人が乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- ・ 引出しを必要以上に強く引き出さないでください。抜け落ちてケガをすることがあります。
- ・ 改造や代用部品の使用はしないでください。本品の破損や使用中の事故につながる恐れがあります。

仕 様

－ トレーボックス －

品 番	8-2314-21	8-2314-22	8-2314-23	8-2314-24
型 番	80H-3P	80H-3B	120H-2P	120H-2B
カラー (引出しパネル)	ピーチ	ブルー	ピーチ	ブルー
カラー (筐体／トレイ)	グレー／ブラック			
外寸(mm)	W320×D408×H280			
引出し内寸 (mm)	W270×D365×H70 ＜収納サイズ：B4縦＞		W370×D365×H107 ＜収納サイズ：B4縦＞	
引出し段数	3 段		2 段	
重量(kg)	3.6		3.7	
材 質	ABS樹脂			
付属品	鍵×2本、連結用部品 3種×各2個(P1参照)			

－ 仕切板セット －

品 番	8-1607-11	8-1607-12	8-1607-13	8-1607-14	8-1607-15
型 番	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
外枠外寸 (mm)	W267×D370×H45 (引出し全段共通利用可)				
図					
最大区分	3区分	4区分	4区分	6区分	6区分
タテ仕切	2枚 (取付溝:5)	—	1枚 (取付溝:5)	1枚 (取付溝:5)	1枚 (取付溝:5)
ヨコ仕切 (長)	—	3 (取付溝:9)	—	—	2枚 (取付溝:9)
ヨコ仕切 (1/2サイズ)	—	—	2枚 (取付溝:9)	4枚 (取付溝:9)	2枚 (取付溝:9)
ヨコ仕切 (3/5サイズ)	—	—	—	—	2枚 (取付溝:9)
ヨコ仕切 (2/5サイズ)	—	—	—	—	2枚 (取付溝:9)

＜セット方法＞

- ・ 外枠(一体成型・共通)をトレー内にセットし、タテ／ヨコ仕切板を外枠の溝に差込んでください。
- ・ タテ／ヨコ仕切板は、取付ける溝のピッチに合わせて移動できます。

※ 仕切板はセットでの販売のみとなります。

お手入れ方法とご注意



- ・ 清拭する際には中性洗剤をご使用ください。
- ・ 塩素系の薬剤などは樹脂の劣化や変色の恐れがありますので、極力使用しないで下さい。
- ・ クレンザーなどの磨き粉、研磨剤入りのスポンジなどを使用しないでください。
塩素系漂白剤、酸やアルカリ性洗剤、シンナー、クレゾールなどは使用しないでください。
製品の劣化による破損・腐食や、変色など引き起こす恐れがあります。

保管のしかた

- ・長くお使い頂くために、直射日光に当たる様な場所でのご使用・保管はお避けください。
- ・汚れのひどいときには、中性洗剤を薄めたものをスポンジや柔らかい布に含ませ、汚れをふき取った後、水を浸した布で洗浄液をよく拭き取ってください。その後乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させて下さい。
- ・塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤、有機溶剤は使用しないでください。劣化や変色が生じる恐れがあります。

※ 本仕様は性能向上のため、予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。

販売元:アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

Made in ISRAEL

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	トレーボックス
型 式	80H-3P/80H-3B/120H-2P/120H-2B
保 証 期 間	お買い上げ日より 6ヶ月
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-711-875 (フリーダイヤル)



FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)



<https://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社

統合第1版 2016年2月作成