


フッ素樹脂成形センサー

(6-8331-01~06)


この度は、当製品を御購入頂き、誠にありがとうございます。御使用前にこの説明書をお読みください。

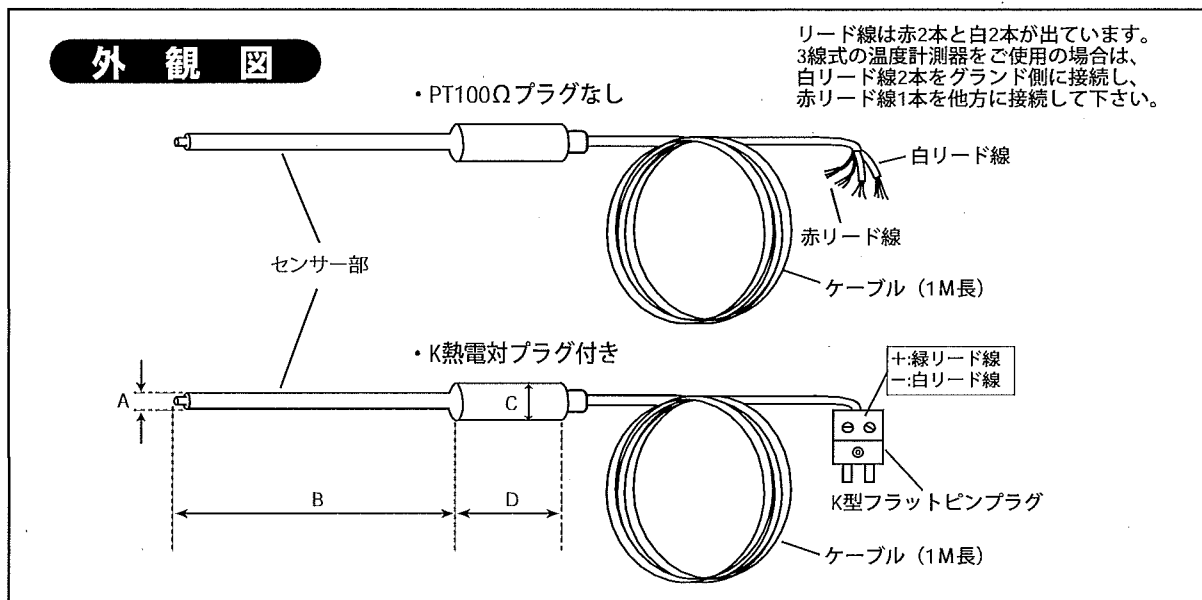

* K型プラグを使って接続する場合は、K型プラグ取付方法に従って、K型プラグをリード線に取り付けて下さい。

< K型プラグ取付方法 >

- ① プラグのカバーを止めている2本のネジを外し、カバーを開けます。
- ② リード線押さえ金具のネジを緩め、プラグのプラス極に緑色、マイナスに白色のリード線を差し込み、ネジでしっかり固定します。
- ③ プラグのカバーを元に戻し、ネジで固定します。

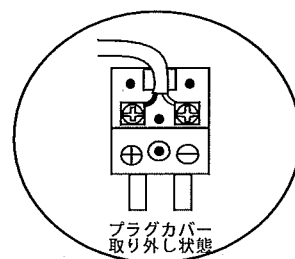

仕 様

品番	6-8331-01	6-8331-03	6-8331-04	6-8331-02	6-8331-05	6-8331-06
本体材質	センサー部：フッ素樹脂 (PTFE) 成形 ケーブル：フッ素樹脂 (PFA) コーティング					
タイプ	PT100Ω プラグ無し			K熱電対プラグ付き		
直径 A (mm)	8	7	7	8	7	7
長さ B (mm)	300	100	200	300	100	200
直径 C (mm)	11	10	10	11	10	10
長さ D (mm)	40	35	40	40	35	40
測定温度範囲	-70℃～+300℃			0℃～+300℃		
連続使用最高温度	約280℃					

■商品についてのお問い合わせは フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763
<http://help.as-1.co.jp/q>

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません