

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また製品を未永くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

＜取扱説明＞

使用マークについて

本文中の △ 印付きの説明は安全性や製品の品質に関して特に重要な事項ですから、必ずお守りください。

△ 警告 - この事項を守らなければ、万一の場合死にまたは重症を負うことがあります。

△ 注意 - この事項を守らなければ、万一の場合傷害を負うことがあります。
また、製品の破損や故障の原因にもなります。

△ 警告 安全にご使用いただくための警告

- 本製品は上肢台です。用途以外には使用しないでください。万一用途以外での使用で事故を起こされても、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 関節・可動部分の隙間や穴に手を入れないでください。手をはさんでケガをすることがあります。

注意 安全にご使用いただくための注意

- 乱暴な取り扱いをしないでください。転倒しケガをすることがあります。
- 異常音、作動不良など損耗現象が発生した場合は、部品の交換が必要です。そのままでご使用されますと、破損や故障の原因となります。
- 床面が木質のフローリングや塩化ビニール樹脂など軟らかい床材の場合、床面に脚部によってへこみやキズがつく場合がありますのでご注意ください。使用の場合は、必ずその場所にかーペットなどを敷いて床材の表面を保護してください。
- 直射日光又は熱をお避けください。
香しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤をご使用ください。

＜品質表示＞


①寸法・質量

単位：mm

外形寸法					
品番	全幅	全奥行	台部寸法	全高	質量kg
JYO-1	480	φ400	460X220	655~815	6.0

②構造部材

No.	部品名	材質
①	張り材	ビニールレザー（抗菌・防汚・撥水）
②	台部	塩化ビニール板
	芯材	ウレタンフォーム
③	回転部	（塗装）
④	回転部固定棒	（クロームメッキ）
⑤	回転部固定金具	（クロームメッキ）
⑥	脚部	（クロームメッキ）
⑦	脚部	ポリプロピレン
⑧	ガススプリング	ガススプリング（鋼）
⑨	支柱カバー	ポリエチレン
⑩	上下調節爪	ポリプロピレン+鋼（クロームメッキ）

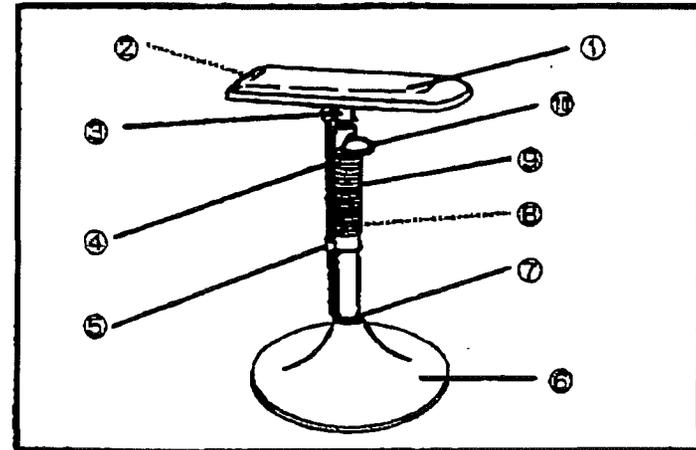

＜使用方法＞ 上下調節方法

- 台部を上げるときは、上下調節レバーを上方へ引きます。希望の高さになったらレバーから手をはなして下さい。
- 台部を下げるときは、上下調節レバーを上方へ引きながら台部を上方から押します。希望の高さになったらレバーから手をはなして下さい。

アズワン株式会社

フリーダイヤル 0120-711-875

FAX 0120-711-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2002年 7月 第1版