


＜取付け方法＞

- ・カーテンに溶着しているマジックテープ（メス）から両面テープ付きマジックテープ（オス）を取り外してください。
- ・マジックテープ（オス）の両面テープの保護紙をはがし、デシケーターに貼り付けてください。
- ・デシケーターに貼り付けたマジックテープ（オス）にマジックテープ（メス）を貼り付けてください。

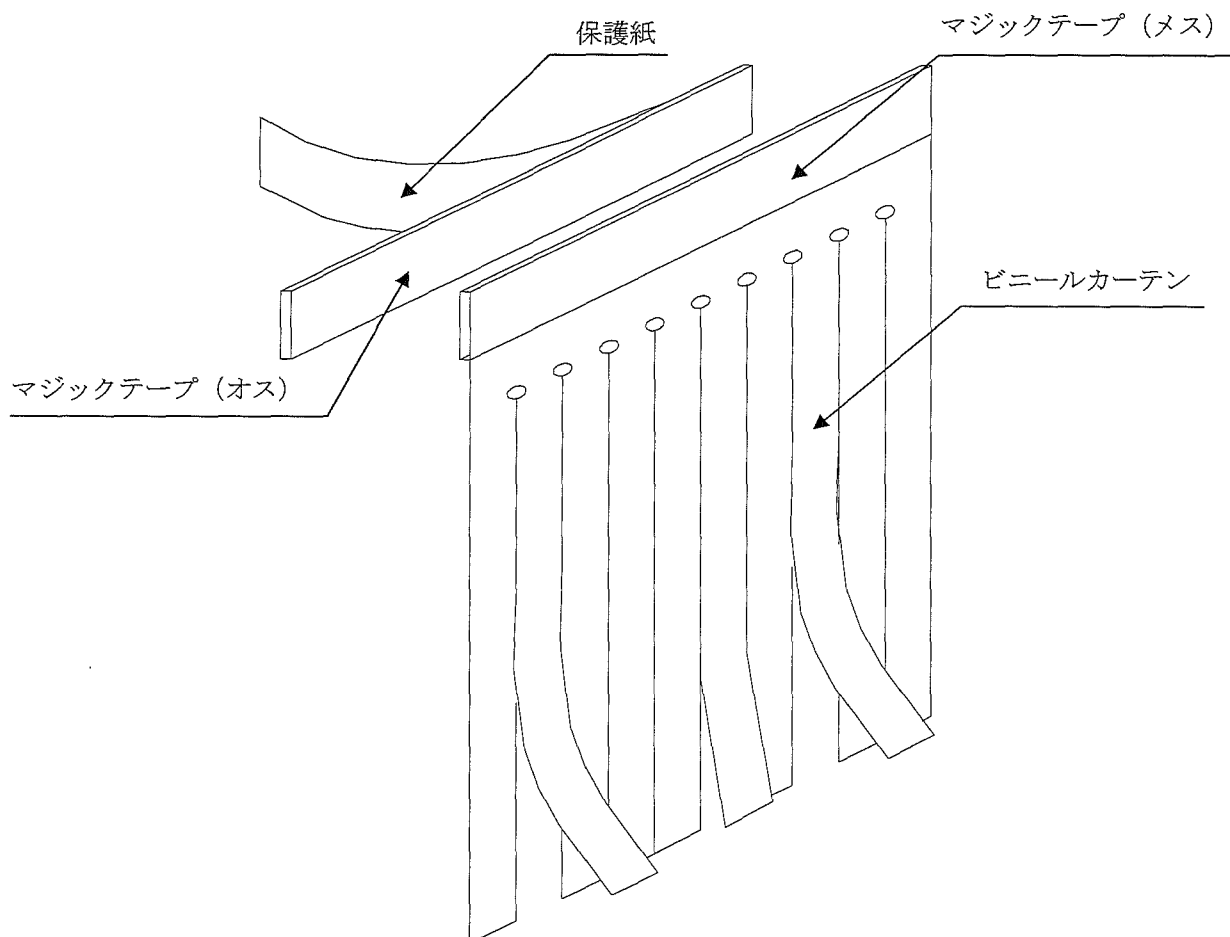

＜材質＞

RX79	RX79F
軟質塩化ビニル	制電製軟質塩化ビニル

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。