


取扱説明書

Instruction Manual

トリプルタイマー


WB388N 6-7154-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

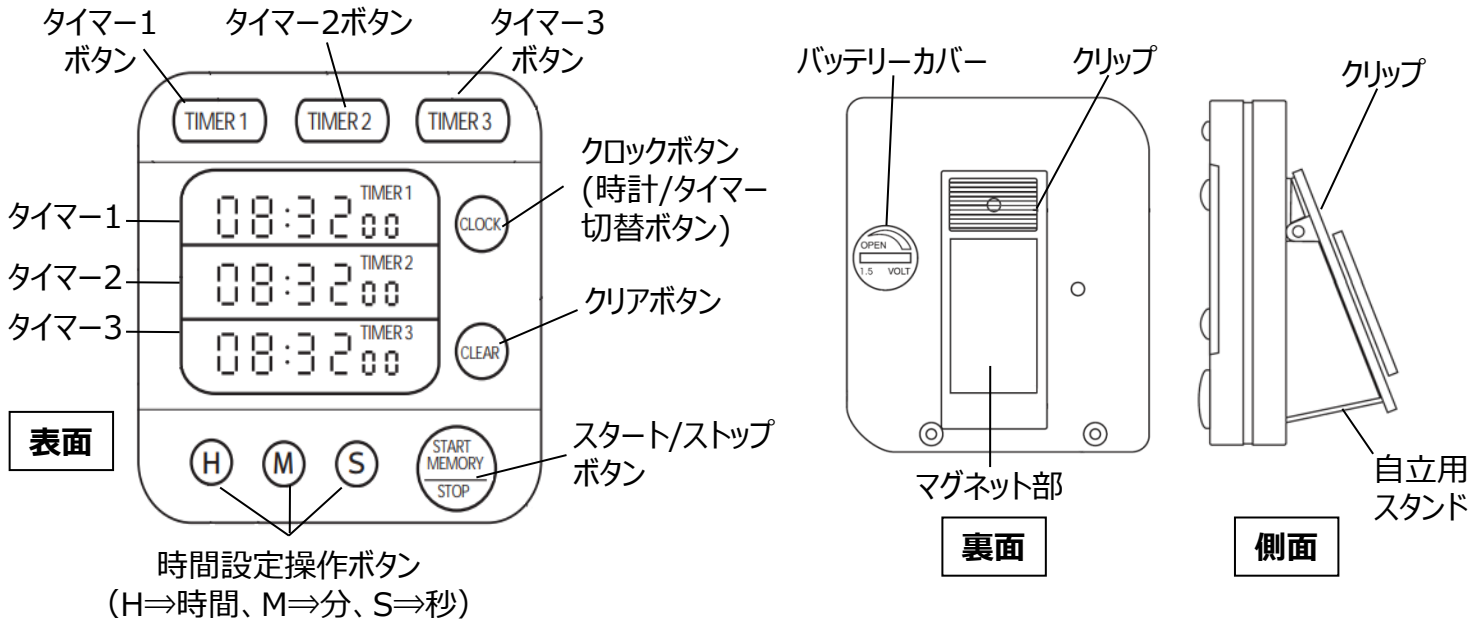

使用・セット方法

《時刻・アラーム・日付の設定》

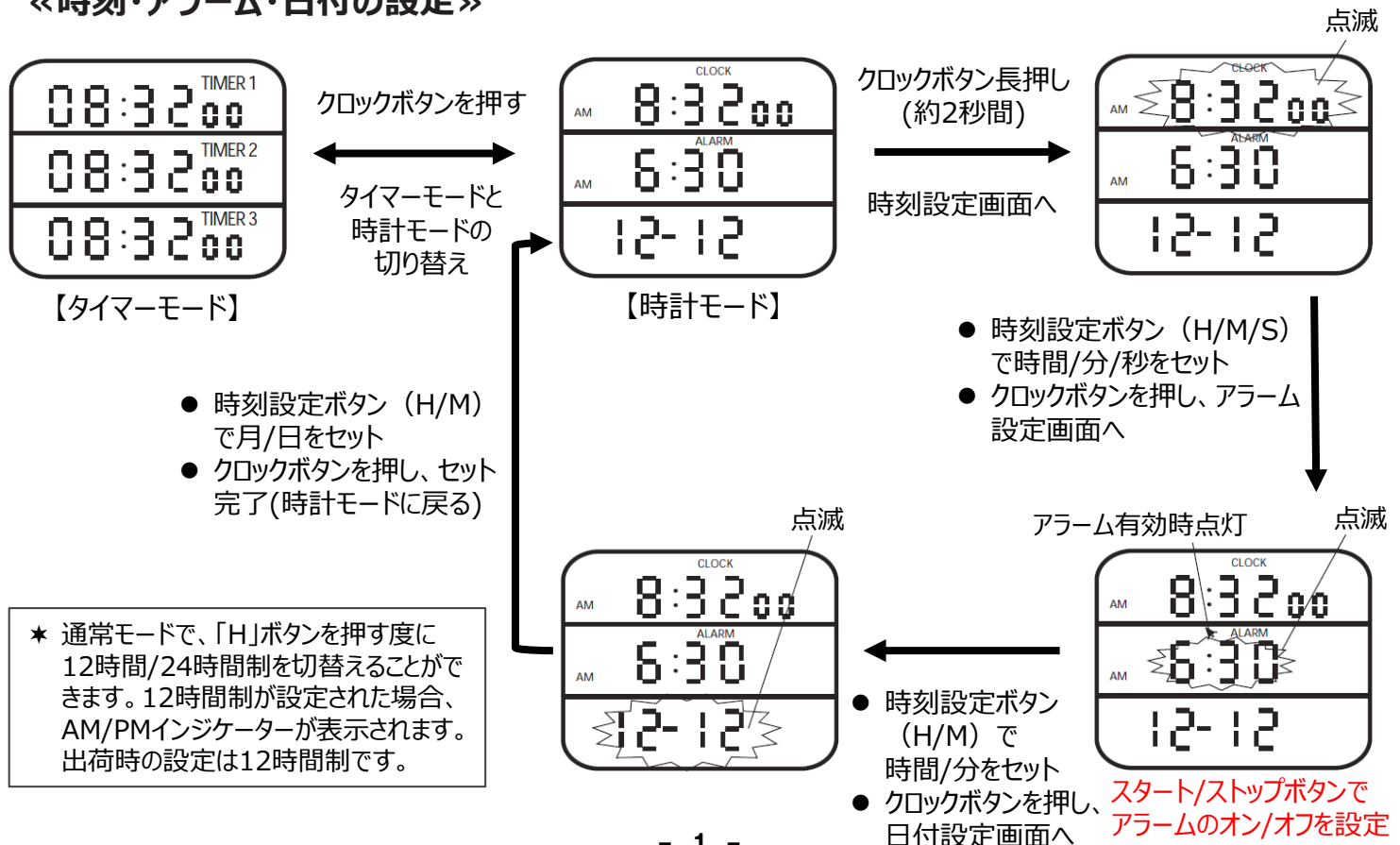

《タイマー》

■ カウントアップ

- ① 時計モードが表示されている場合は、クロックボタンを押し、タイマーモードに切り替えます。
 - ② タイマーボタン1,2,3で、タイマー画面の1,2,3番目をそれぞれ操作出来ます。
 - ③ タイマーボタンを押すとカウントを開始し、再びタイマーボタンを押すとカウントをストップします。この時点で、もう一度タイマーボタンを押すと、止まった時間からカウントを始めます。
 - ④ クリアボタンを押すとカウントはリセットされ、0からカウントを始めます。カウントをしている間は、「TIME'S UP」の文字が点滅表示されます。カウント停止中は「TIME'S UP」が常時点灯しています。
 - ⑤ クリアボタンを押すと、表示を「00：00：00」にリセットできます。
- ★ スタート/ストップボタンを押すと全てのタイマーがカウントを始め、再びスタート/ストップボタンを押すと全てのタイマーのカウントが止まります。

■ カウントダウン

- ① タイマーボタン1,2,3の、設定したいチャンネルのいずれかを数値が点滅するまで押し続けます。（約2秒間）
- ② 時間操作設定ボタン（H/M/S）で、カウント時間をセットします。
- ③ 設定したチャンネルのタイマーボタンを長押しし、点滅を止め、設定完了です。
- ④ スタート/ストップボタンを押してカウントダウンを開始します。
- ⑤ 指定の時間に到達後、アラームが鳴ります。アラームは1分間鳴り続けます。即時停止するには、いずれかのボタンを押します。

■ カウントダウン設定時間の記憶

カウントダウン設定時間は、端末に記録され、次回簡単に呼び出すことができます。

- ① カウントダウンのアラームが鳴った後、いずれかのボタンを押してアラームを止めます。
- ② クリアボタンを押し、画面の表示を「00：00：00」にリセットします。
- ③ スタート/ストップを押すと、前回設定したカウント時間が表示されます。

記録をリセットするには、下記の手順の通りです。

該当するチャンネルのタイマーボタンを長押し→クリアボタンを押す→タイマーボタンを再度長押しして点滅を止める

★ 一度に複数チャンネルの記憶をリセットすることはできません。個別にリセットを行う必要があります。

《アラーム》

■ 各タイマーのタイマーアラーム音について

アラームは、タイマー毎に種類の違うビープ音を有しています。

タイマー1：「ピ ピ ピ……」

タイマー2：「ピピ ピピ ピピ……」

タイマー3：「ピピピ ピピピ ピピピ…」

複数のタイマーのアラームが重なった場合、最後に「0」に達したアラームの音だけが聞こえます（各タイマーのアラーム音は重複して鳴りません）。

例えば、タイマー3が鳴っている間にタイマー1が「0」になった際には、タイマー1のアラームが聞こえます。

■ 時計モード時のタイマーアラームについて

時計モード中、実行中のタイマーがある場合は、該当のタイマーの名称(TIMER 1, TIMER2, TIMER3)が画面上で点滅します。

時計モード中に鳴ったアラーム音については、いずれかのボタンを押すことで音を止めることができます。

■ 時刻アラーム(時計モード)のスヌーズ機能について

時計モードで設定したアラームは、スヌーズ機能が利用できます。

- 指定した時刻にアラームが鳴っている間、クリアボタンを押すとスヌーズ機能がONになり、8分後に再度アラームが鳴ります。
- クリアボタンで時刻アラームを停止することで何度でもスヌーズ機能を使用できます。スヌーズ機能を使用したくない場合は、時刻アラームはクリアボタン以外を押して停止してください。


《アラームの持続時間について》

アラームは1分間鳴った後、自動的に消音します。アラームの音を鳴らさない設定にすることはできません。即座にアラームを止める場合は、いずれかのボタンを押してください。

《タイマーを自立させる》

タイマー背面の、クリップ部分に隠れた部分に自立用のスタンドが収納されています。クリップの上部を押してクリップを開きながら、タイマーを傾けて自立用スタンドを収納部から取り出し、クリップの裏側にある溝にスタンドを引っかけることで自立させることができます。

電池交換方法

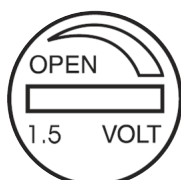

- ① タイマー裏面のバッテリーカバーの溝にコイン等を差し込み、OPENの方向に約30°回し、カバーを外します。
- ② 古い電池を外し、新しい 1.5V LR44ボタン電池 (G13タイプも可)を、表面が+側になるようにして、奥までしっかりと挿入します。
- ③ バッテリーカバーをはめ、コインを用いて手順①とは逆方向にカバーを回して閉めます。

※ 初回使用时、内蔵されているテスト用電池のプラスチックの絶縁テープを外してからお使いください。

※ テスト用電池のため、消耗している場合があります。

⚠️ ご注意

- 規定の電池以外は使用しないでください。
- 故障の原因となりますので、本製品を分解・改造などしないでください。
- 極度の高温・低温となる場所への設置は避けてください。
- 電池や本製品を廃棄する際は、地域のルールにお従ってください。

トラブルシューティング

不具合	原因と対策
時計モードで設定したアラームが鳴らない	アラームが有効化されていない可能性があります。「ALARM」の文字の左隣に、ベルのアイコンが表示されているかご確認ください。ベルのマークが表示されていない場合、アラーム機能がOFFになっています。アラーム機能のON/OFF切り替えは、アラームの時刻設定時、スタート/ストップボタンを押すことで変更ができます。
スヌーズ機能が作動しない	スヌーズ機能は、時計モードのアラームが鳴った際にクリアボタンで止めた時のみONになります。クリアボタン以外のボタンではスヌーズ機能がONになりません。スヌーズは、クリアボタンを押した時点から8分後に音が鳴ります。クリアボタンを押した後に、再度クリアボタンを押すと、『最後に押した時点から8分後』に鳴りますのでご注意ください。
画面の表示が薄い、何も映らない	電池の残量が不足している可能性があります。新品の「1.5V LR44 (またはG13) ボタン電池」と交換してください。
誤った表示が画面に映る	
アラームの音量が小さすぎる、鳴らない	
フリーズする、表示が突然消える	電池の接触に問題が生じた可能性があります。電池を挿入し直し、解消するかご確認ください。挿入する際は、奥までしっかりと入れ、固定することを意識してください。

仕様

最大設定時間	99時間59分59秒
最小設定時間	1秒
精度	±0.5秒/日 (タイマー1~3、時計機能ともに同じ)
使用温度	室温
サイズ	70mm × 83mm × 22mm
重量	約80g (電池含む)
電源	LR44 ボタン電池(1.5V) × 1個 (テスト用電池付属) ※内蔵されているテスト用電池は、消耗している場合があります。
アラーム	約100dB ※消音不可、音量調節不可
機能	時計機能 : 現時刻表示、アラーム設定時刻表示、日付表示 タイマー機能 : カウントアップ(ストップウォッチ)、カウントダウン(タイマー) その他機能 : 3チャンネル独立タイマー(内蔵タイマー1個)、 時計機能表示中タイマー使用可能、プッシュ音 (消音不可)

Made in China

保証規定

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	トリプルタイマー WB388N
品番	6-7154-01
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第5版 2018年12月作成