

# ジェルロン 体位変換クッション

介護保険適用福祉用具 TAIS 00839-000013

30° 保持形状



使用ジェルの厚さ 2.1cm

洗浄について カバー、中身とも可能


カバー仕様 高通気:ポリエステル

防水清拭:ポリエステル・ポリウレタン

	寸法(cm)	品番	カバータイプ	重量	
標準	W35×D21×H12	GTC-TH	高通気カバー	550g	
	W35×D21×H12	GTC-THB	防水・清拭カバー	550g	
ロングタイプ	W70×D21×H12	GTC-THL	高通気カバー	1,100g	
	W70×D21×H12	GTC-THLB	防水・清拭カバー	1,100g	

材質 ■中身:ジェルロン・高通気フォーム ■高通気カバー:ポリエステル ■防水・清拭カバー:ポリエステル/ポリウレタン

- 使用例・用途：
- 寝たきりの方の良肢位保持サポート
  - 体位変換補助クッションとして
  - 側臥時背中に入れて30度の側臥保持
  - 手術中の姿勢保持サポートクッション

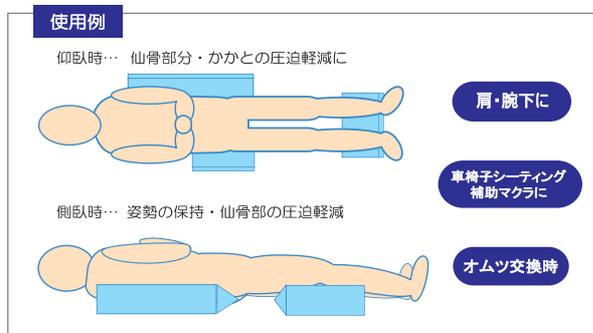


## 体圧分散性

○立体格子形状の「ジェルロン」が圧力を吸収し、使用面の皮膚、筋肉への負担を軽減。

## ずれ力吸収力

○ずれ力の吸収性にも優れており、皮膚・筋肉への負担を減らすと同時に、体自体のずれを吸収し側臥姿勢を安定させます。

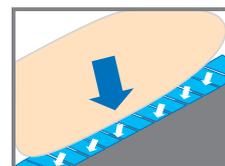

## 通気性

○「ジェルロン」の立体格子内に空気層を多く含み、使用することによる立体格子の形状変化で空気の入替えを常に行い、接触面を快適な状態に保ちます。(高通気カバー)

## 洗浄可能

○汚れた場合にはカバー、中身とも洗浄可能です。カバーは洗濯表示に基づき、中身の「ジェルロン」はシャワー等で汚れを流して頂き(中性洗剤・石鹼等も使用可能)すすいだ後は脱水機にかけていただき、その後は陰干し。仕上げにアルコール消毒をしていただくことも可能です。

○素材(主成分のミネラルオイル)の特性として「ジェルロン」自体にカビが発生することはありません。  
(※付着したゴミ等に発生する場合があります。)