


万能シェーカー用試験管ラックホルダー 取扱説明書

この度は、万能シェーカー用試験管ラックホルダーをご購入頂きまして誠にありがとうございます。
ました。

本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸
与されるときには、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本
体と共に必ずお渡しください。

＜外観図＞

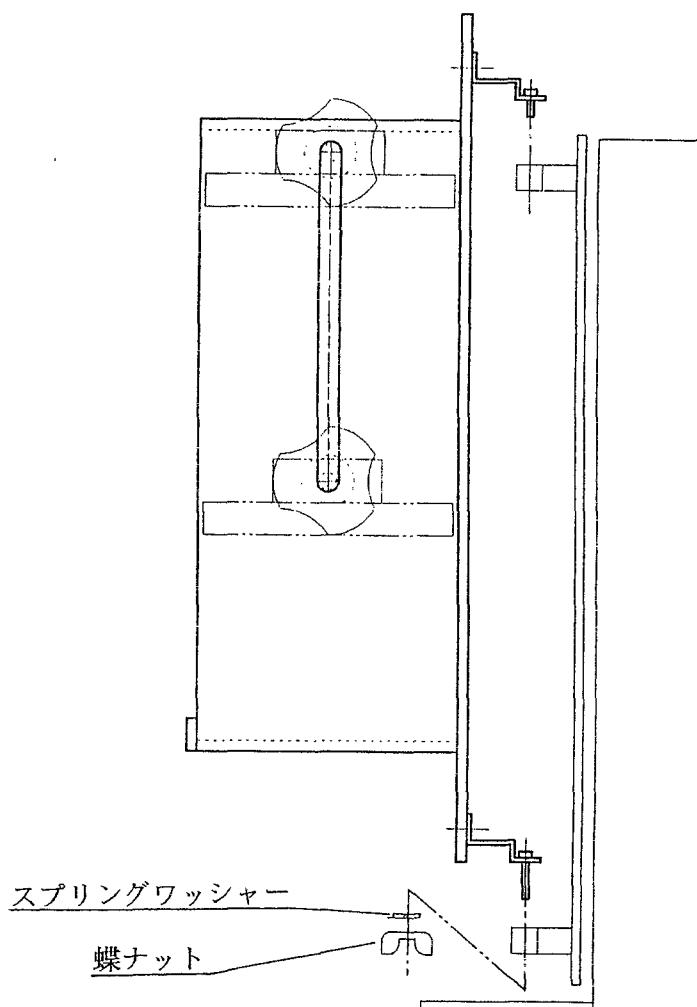

＜取付方法＞

本体裏面のブラケットに取り付けてあるビスを、万能シェーカーのホルダー取り付け穴位置に
合わせてセットし、蝶ナットで固定してください。この時、付属のスプリングワッシャーはナッ
トの緩み防止の為、必ず使用してください。

アズワン株式会社
AS ONE

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません