

取扱説明書

7-8036-01 カテーテル収納ユニット CA-O900

目次

安全上のご注意	・・・2
商品の構成	・・・3
主要部品の仕様	・・・3
固定具取り付け方法	・・・4
保証書	・・・5



お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

	危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。		注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。		お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの障害が起こる可能性がある場合の禁止
	特定しない、一般的な使用者の行為		

【使用上の安全に関する注意】

		危険
	・本製品の上に乗らないでください。転倒してケガをしたり、破損する恐れがあります。	
		警告
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故が起きた場合、当方は一切の責任を負いかねます。	
		注意
	・本体や他の部分に、強い衝撃を与えたり無理な力を加えると、ひずみが生じたり、転倒してケガをする恐れがありますので、丁寧に扱ってください。	

【設置上の安全に関する注意】

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

	・水平で安定したところにてご使用ください ・設置後はアジャスターにてレベル出しをし、安定させてください。
--	---

※この製品は、屋外で使用することはできません。

【お手入れについて】


清掃は、お湯又は水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

	・クレンザー(磨き粉)、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。
--	---


【付属品】

- ・ 棚板 × 4枚
- ・ 棚受金具 × 16個
- ・ 壁面固定のための固定具 (ステンレスL字アングル) × 2個
- ・ ビス (M6) × 2個

【商品の構成】

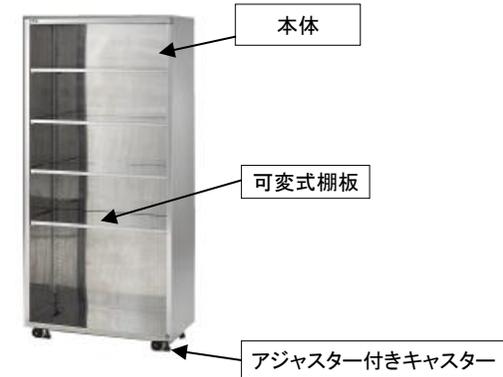

【棚板取付手順】

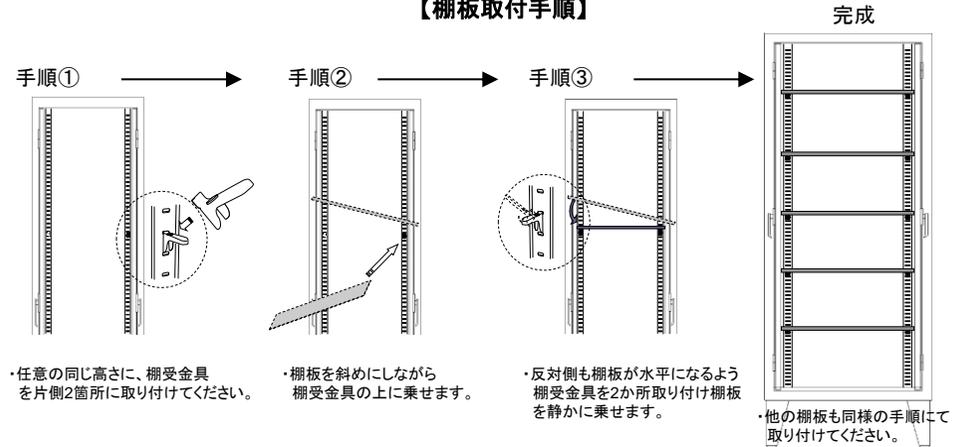


【主要部品の仕様】

	仕様・サイズ等
本体外寸(mm)	900×450×1900(mm)
棚板サイズ	850×415(mm)
棚板受けピッチ	25mmピッチ60段
材質	本体・棚板/ステンレス(SUS430)
キャスター	Φ63mm/アジャスター付き
重量	約50kg

《壁面固定具の取り付け方法》

・天板に固定具用の穴が2か所ありますので、穴に合わせて固定具を合わせ付属品のビスでしっかりと留めてください。壁側の取り付け部品は壁側の材質に合わせてご準備ください。(穴径は7mm×20mm)

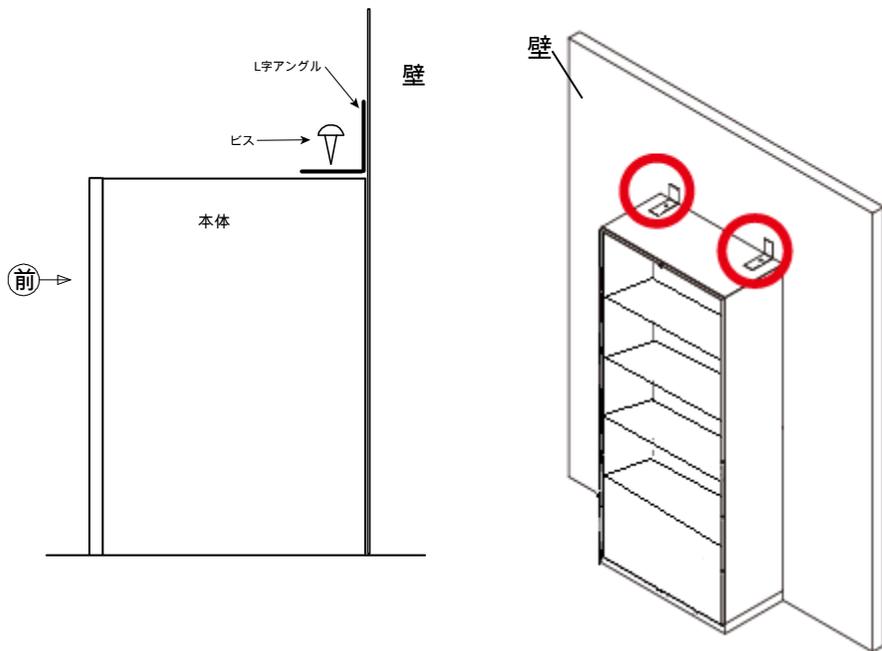

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は下記保証規定により修理いたします。

品名	カテーテル収納ユニット(オープンラック)
型式	CA-O900
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買上日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL.
取扱店名	担当者印
住所	TEL.

アズワン株式会社

<保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは カスタマー相談センター TEL. 0120-711-875 FAX. 0120-700-763 問合せ専用URL https://help.as-1.co.jp/q	修理・校正についてのお問い合わせは 修理窓口 TEL. 0120-788-535 FAX. 0120-788-763 問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp
--	--

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。